

Comfeel®

Cuidado de heridas

Los productos **Comfeel® Plus** para el cuidado y prevención de heridas, son efectivos en el manejo de todo tipo de úlceras, escaras y heridas post-quirúrgicas mediante un ambiente húmedo de cicatrización.

Comfeel® es la línea de productos de Coloplast para el tratamiento y cuidado de heridas. Pueden ser utilizados en hospitales, clínicas o en casa, en pacientes que presentan heridas agudas y crónicas. Ofrecen resultados avanzados en cuanto desempeño, calidad de vida y rentabilidad de uso, para pacientes, profesionales e instituciones de salud.

Comfeel® Plus controla el exudado y promueve un medio ambiente húmedo ideal para el proceso de cicatrización, a través de su formulación exclusiva de Carboximetilcelulosa y alginato de calcio. Esta formulación en conjunto con la acción de la membrana inteligente de permeabilidad selectiva, garantiza el nivel del exudado preciso para una eficiente evolución del proceso de cicatrización.

Un mejor control del exudado significa cambios menos frecuentes del apósito y mejoras en el proceso de cicatrización. Es un sistema de aplicación sencillo con “técnica de no tocar” que evita la contaminación de la herida. Posee también bordes biselados y un adhesivo que da mayor seguridad en la fijación del apósito, sin necesidad de colocar apósitos secundarios.

La leve transparencia y exclusiva cuadrícula impresa en la parte posterior del **Comfeel® Plus**, se puede utilizar para medir y señalar el área de la herida, permitiendo monitorear la evolución de la herida por parte del profesional de la salud y observar la señal de cambio.

Comfeel® Plus

Apósito hidrocoloide Transparente



Apósito hidrocoloide delgado, estéril, semipermeable que remueve tejido muerto, promueve la epitelialización, disminuye el dolor y permite la inspección de la herida. Indicado para heridas con exudado leve y heridas superficiales agudas.

Código	Descripción	Presentación comercial
3530	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, transparente , con membrana de permeabilidad selectiva con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa, cuyo grosor es de 0.315mm, cuadrado por centímetro cuadrado de 5 x 7 cm.	Caja con 10 piezas
3533	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, transparente , con membrana de permeabilidad selectiva con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa, cuyo grosor es de 0.315mm, cuadrado por centímetro cuadrado de 10 x 10 cm.	Caja con 10 piezas
3548	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, transparente , con membrana de permeabilidad selectiva con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa, cuyo grosor es de 0.315mm, cuadrado por centímetro cuadrado de 5 x 25 cm.	Caja con 5 piezas

Comfeel® Plus

Apósito hidrocoloide con alginato




Apósito estéril de hidrocoloide y alginato, semipermeable, que maneja exudado bajo a moderado y disminuye el dolor. Indicado para úlceras venosas, arteriales, úlceras causadas por diabetes, úlceras por presión, quemaduras de primero y segundo grado, áreas donantes y abrasiones, entre otras indicaciones.

Código	Descripción	Presentación comercial
3146	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de grosor 0.20mm. Medida de 4 x 6 cm. , en presentación estéril.	Caja con 10 piezas
3110	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de grosor 0.20mm. Medida de 10 x 10 cm. , en presentación estéril.	Caja con 10 piezas
3115	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de grosor 0.20mm. Medida de 15 x 15 cm. , en presentación estéril.	Caja con 5 piezas
3120	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de grosor 0.20mm. Medida de 20 x 20 cm. , en presentación estéril.	Caja con 5 piezas

Comfeel® Plus

Apósito hidrocoloide Contorneado

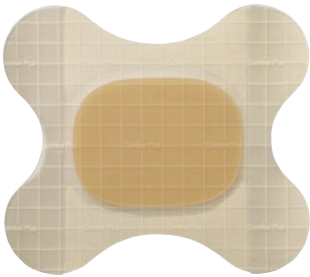


Apósito estéril de hidrocoloide y alginato en forma de mariposa que permite su aplicación en zonas difíciles de colocar como la región sacra, codos y talones.

Código	Descripción	Presentación comercial
3280	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa con alginato de calcio cuyo grosor es de 0.85mm, con bordes biselados con grosor de 0.4mm en forma de mariposa de 6 x 8 cm. , en presentación estéril.	Caja con 10 piezas
3283	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa con alginato de calcio cuyo grosor es de 0.85mm, con bordes biselados con grosor de 0.4mm en forma de mariposa de 9 x 11 cm. , en presentación estéril	Caja con 10 piezas

Comfeel® Plus

Apósito hidrocoloide para Sacro

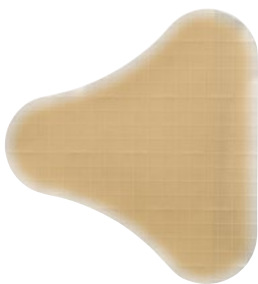

Apósito estéril de hidrocoloide y alginato especialmente diseñado para cubrir la región sacra. Reduce el dolor y promueve la comodidad del paciente.

Código	Descripción	Presentación comercial
3285	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio, cuyo grosor es de 1.15mm, con bordes biselados en forma sacral. Medida de 18 x 20cm , en presentación estéril.	Caja con 10 piezas

Comfeel® Plus

Apósito hidrocoloide Liberador de Presión



Apósito estéril de hidrocoloide y alginato con espuma perforada que libera la presión y promueve la cicatrización.

Código	Descripción	Presentación comercial
3350	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva, cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio cuyo grosor es de 1.1mm, y anillos de espuma desprendibles para control de presión con presentación estéril de 7 cm de diámetro. Y adhesivo microporoso alrededor de los anillos de espuma para generar doble seguridad.	Caja con 10 piezas
3353	Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de permeabilidad selectiva, cuadrículada con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio cuyo grosor es de 1.1mm, y anillos de espuma desprendibles para control de presión con presentación estéril de 10 cm de diámetro. Y adhesivo microporoso alrededor de los anillos de espuma para generar doble seguridad.	Caja con 10 piezas

Biatain®

Cuidado de heridas

Después de 30 años en la atención de heridas, creemos firmemente que la absorción es la clave para acelerar la cicatrización. Nuestro portafolio de Biatain® ofrece absorción superior para las necesidades diarias en atención de heridas, y convierte a Biatain® en una elección simple.

La variedad de productos Biatain® le permite manejar el 90% de todas las heridas en la comunidad y la mayoría de las heridas en hospitales.

Detalles que hacen la vida más fácil:

- Los apósitos Biatain® se ajustan bien al lecho de la herida para una absorción superior y la retención del exudado de la herida, lo que asegura un equilibrio de humedad que es óptimo para la cicatrización de las heridas exudantes.
- Biatain® está indicado para todos los tipos de heridas exudantes.
- Los apósitos Biatain® son efectivos independientemente del nivel de exudación de la herida ya sea bajo, medio o alto.
- Las propiedades de absorción superior permiten que Biatain® no sólo absorba el exudado sino que mantenga a la herida húmeda para una curación óptima.
- La evidencia demuestra que los apósitos Biatain® ofrecen una capacidad de absorción superior, incluso bajo compresión.
- Estructura de espuma 3D exclusiva que logra una absorción superior. Al entrar en contacto con el exudado, la estructura de espuma 3D exclusiva de Biatain se adapta íntimamente al lecho de la herida-, incluso en condiciones de compresión.
- Su exclusiva estructura de espuma 3D absorbe el exudado en sentido vertical y conserva el líquido en el interior de su estructura, manteniendo aún la humedad de la herida a fin de proporcionar condiciones óptimas para la cicatrización de heridas en ambiente húmedo.
- Tiempo de uso prolongado. Gracias a la capacidad de absorción superior de Biatain, el apósito ofrece un tiempo de uso prolongado. Los estudios clínicos han mostrado un tiempo de uso de hasta 7 días.

Biatain® No-Adhesivo

Apósito de espuma



Biatain® No- Adhesivo, absorción superior para heridas con piel extrafrágil. Es un apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable que absorbe y retiene con eficacia el exudado de las heridas. Esto asegura un equilibrio óptimo de la humedad para la cicatrización de heridas exudantes.

Biatain No-Adhesivo puede utilizarse para una amplia variedad de heridas exudantes, que incluyen úlceras de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético no infectadas, quemaduras de segundo grado, sitios donantes, heridas posoperatorias y excoriaciones cutáneas. Biatain No-Adhesivo puede emplearse en combinación con un tratamiento de compresión.

Código	Descripción	Presentación comercial
3410	Apósito de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas con exudado de moderado a alto. Esterilizado por redición. 10 x 10 cm.	Caja con 10 piezas
3413	Apósito de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas con exudado de moderado a alto. Esterilizado por radiación. 15 x 15 cm.	Caja con 5 piezas
3416	Apósito de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas con exudado de moderado a alto. Esterilizado por radiación. 20 x 20 cm.	Caja con 5 piezas

Biatain® Cavidades

Apósito de espuma



Código	Descripción	Presentación comercial
3451	Apósito de espuma de poliuretano para heridas cavitadas con exudado de moderado a alto. 5 x 8 cm.	Caja con 10 piezas

Biatain® Adhesivo

Apósito de espuma



Biatain® Adhesivo, absorción superior para heridas que requieren mayor adhesión. Apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable con un adhesivo hidrocoloide.

Biatain® Adhesivo puede utilizarse para una amplia variedad de heridas exudantes, que incluyen úlceras de pierna, úlceras por presión, quemaduras de segundo grado, sitios donantes, heridas posoperatorias y excoriaciones cutáneas. Biatain® Adhesivo puede emplearse en combinación con un tratamiento de compresión.

Biatain® Adhesivo es un apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable que absorbe y retiene con eficacia el exudado de las heridas. Esto asegura un equilibrio óptimo de la humedad para la cicatrización de heridas exudantes.

Maceración y filtración mínimas. La absorción y la retención superiores del exudado minimizan el riesgo de maceración y filtración. El uso de este apósito adhesivo es muy adecuado para las heridas con piel periulceral sana y para las áreas que requieren mayor adhesión.

Código	Descripción	Presentación comercial
3420	Apósito adhesivo de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas con exudado de moderado a alto. Estructura de espuma 3D. Esterilizado por radiación. 12.5 x 12.5 cm.	Caja con 10 piezas
3421	Apósito adhesivo de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas con exudado de moderado a alto. Estructura de espuma 3D. Esterilizado por radiación. 15 x 15 cm.	Caja con 5 piezas
3423	Apósito adhesivo de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas con exudado de moderado a alto. Estructura de espuma 3D. Esterilizado por radiación. 18 x 18 cm.	Caja con 5 piezas

Biatain[®] Ag

Cuidado de heridas

Biatain[®] Ag es la mejor solución para heridas infectadas, asegurando la eliminación rápida de todas las bacterias y proporcionando una adecuada absorción del exudado.*

Apósito de espuma con y sin adhesivo, estéril, de uso único, compuesto de espuma de poliuretano con plata dispersa como componente activo, proporciona condiciones de humedad óptimas para la curación de la herida, facilitando el tratamiento a través de una combinación de actividad antibacterial y de control de exudado.


Detalles que hacen la vida más fácil:

- Ambiente óptimo para la curación Su espuma de polímero con estructura 3D única en el mercado asegura una gran absorción y retención, incluso durante terapia de compresión.
- Eliminación rápida de bacterias La concentración óptima de plata asegura el exterminio de las bacterias, tales como MRSA, VRE, ESBL y Pseudomonas.
- Diseño para prevenir la infección de la herida Nuestro apósito con plata patentado, ofrece una constante liberación de plata durante todo el tiempo de uso (hasta 7 días).

* Jorgensen et al. Los apósitos de espuma con liberación de plata. Contreet Foam, promueve una curación más rápida de úlceras de pierna críticamente colonizadas. Una muestra aleatoria y controlada. Diario Internacional de Heridas. 2005; 2 (1): 64-73.

Biatain® Ag No-Adhesivo

Apósito de espuma con complejo de Plata

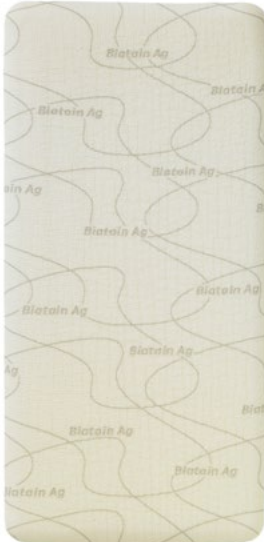

Apósito de espuma de poliuretano absorbente suave y adaptable que presenta un complejo de plata patentado.

Al entrar en contacto con el exudado, la estructura de espuma 3D exclusiva de Biatain se adapta íntimamente al lecho de la herida-, incluso en condiciones de compresión.

El perfil de plata patentado y la liberación sostenida de plata garantizan una distribución homogénea de los iones de plata, procurando un efecto antimicrobiano continuo durante todo el tiempo de uso (hasta 7 días).

Biatain Ag No Adhesivo puede utilizarse para una amplia variedad de heridas exudantes con cicatrización retardada a causa de bacterias o cuando existe riesgo de infección, lo que incluye úlceras de pierna, úlceras por presión, quemaduras de segundo grado, sitios donantes, úlceras de pie diabético, heridas posoperatorias y excoriaciones cutáneas.

Los estudios independientes han comprobado que Biatain Ag es el único apósito para heridas que es eficaz contra todas las bacterias presentes habitualmente en las heridas no cicatrizantes infectadas. Los estudios clínicos han mostrado que las heridas infectadas tratadas con Biatain Ag cicatrizan con mayor rapidez que con los demás apósitos para heridas, incluso otros apósitos antimicrobianos.

Hidrocoloide delgado, estéril, semipermeable que remueve tejido muerto, promueve la epitelización, disminuye el dolor y permite la inspección de la herida. Indicado para heridas con exudado leve y heridas superficiales agudas.

Código	Descripción	Presentación comercial
39623	<p>Apósito de poliuretano, suave, flexible, con complejo de plata patentado, cuya liberación continua durante el tiempo de uso (hasta 7 días), disminuye el tiempo de cicatrización en heridas infectadas. Actividad antibacteriana en combinación con control de exudado de moderado a alto. Estructura alveolar en 3D. Esterilización por radiación.</p> <p>Biatain Ag puede emplearse en combinación con un tratamiento de compresión. 10 x 20 cm.</p>	Caja con 5 piezas